

Celercare V5

Química Sanguínea
Basado en
Microfluidos



Especificaciones

Pantalla Táctil	8.4 Pulgadas con interfaces amigables
Impresora	Térmica integrada, imprime informes automáticamente
Conexión	WIFI, USB, Bluetooth, Entrada/Salida Bidireccional
Memoria	50.000 Resultados de pacientes y control de calidad
Dimensiones	26cm (Ancho) *32cm (Altura) *23cm(Base)
Peso	5,5 kg (12,13 libras)

rQCC[®]

Sistema Control de Calidad Automático
en Tiempo Real incorporado



Discos Disponibles


Perfiles Veterinarios

Control de Salud Normal
Control de Salud PLUS
Hepático y Renal
Electrolitos
Integral



Funcionamiento

Disco Reactivo

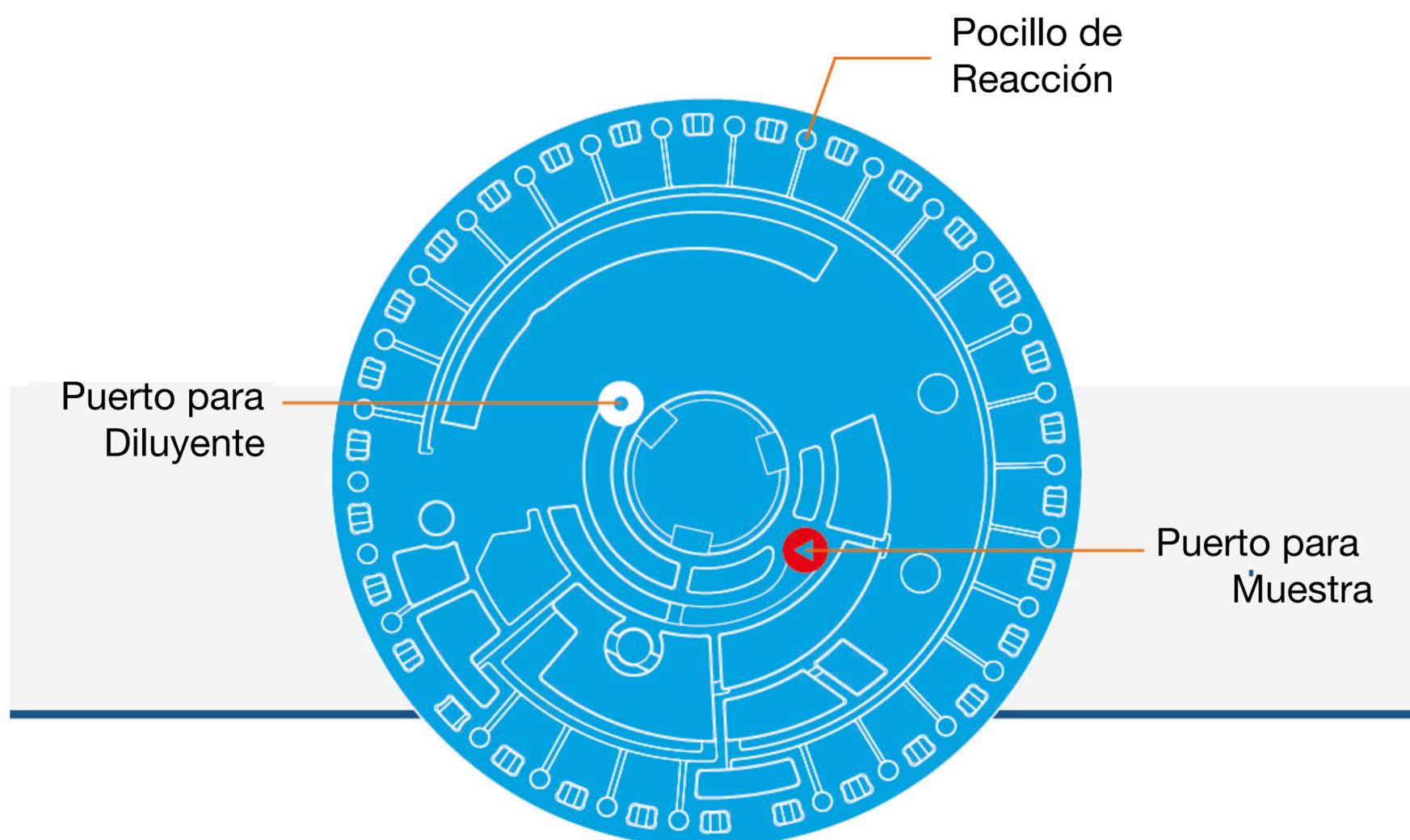

7.8 cm de diámetro y 0.68 cm de grosos, contiene todos los reactivos necesarios para realizar un panel de pruebas en una sola muestra.

8 a 12 minutos

Tiempo de reacción **100 µl**

Tamaño de Muestra

Aditivos

anti-coagulantes

Sangre entera, suero o plasma

TIPO



1

Agregar muestra & diluyente

100 µl de sangre total, suero o plasma
+ 430 µl de diluyente



2

Inserte el disco

Operación independiente, se calibra automáticamente con cada prueba



3

Impresión automática

Leer resultados

Mantenimiento

Ahorre tiempo y costos, Celercare V5 requiere poco o ningún mantenimiento en comparación con analizadores de química tradicional.

Bitrodiagnóstico cuenta con servicio técnico certificado **MNCHIP**, garantizamos mantenimientos preventivos y correctivos para que su equipo trabaje por décadas.

Compre equipos con garantía, denuncie equipos de contrabando.

Somos Bitro + Plus

asesoriavet@bitrodiagnostico.com
096 909 6200

asesoriavet2@bitrodiagnostico.com
099 571 8463

Actualizaciones mensuales en diagnóstico veterinario

Especialistas de Producto BITRO veterinario

CLUB
VIP
CLUB



se parte del

CLUB
VIP
CLUB

Seguridad · Educación · Automatización

Somos Bitrodiagnóstico

Acreditación BPADT - ISO 9001:2015

Pioneros en técnica de microaglutinación en columna gel con solución en gestión administrativo eD10 + innovación en pruebas rápidas de diagnóstico inmunocromatográfico humano y veterinario contamos con capacitación continua y mantenimientos garantizados.

Call Center

Pedidos/Cotizaciones 099 871 0480

21 AÑOS
DIAGNOSTICO
CORRECTO

@BitroEc #bitroeduca
www.bitrodiagnostico.com

Lo mejor del mundo en tus manos



Matriz Quito

Sucursal Cuenca

Sucursal Guayaquil

Centro de Distribución ↗ ↘

Pedregal N34-42 y Rumipamba

Av. Fray Vicente Solano 4-101 Edificio CICA oficina 207

Cdla. Kennedy Norte, Victor Escalada y José Castillo, Edificio SAI BABA - Oficina 104

Sebastián Moreno Oe1-308 y Mariano Cardenal

(02) 2243 800

(02) 2435 401

(02) 2800 352

(04) 2685 509

MNCHIP

CONFIDENCIALIDAD: esta marca y documento contiene información de uso exclusivo de Bitrodiagnóstico Cía. Ltda. Su distribución y reproducción total o parcial debe ser compartido para avances en salud y conocimiento universal.

Todos los derechos reservados. Bitrodiagnóstico Cía. Ltda. 2023